

raven[®]
DESIGN

**MY
SMART
STYLE**



Masażer pulsacyjny

massage gun

EMA004




GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis masażera pulsacyjnego EMA004:

1. Głowica masująca
2. Wyświetlacz
3. Przycisk zmniejszania intensywności pulsacji
4. Przycisk zwiększania intensywności pulsacji
5. Włącznik / wyłącznik / przycisk podgrzewania
6. Panel grzejny (na spodzie)
7. Uchwyt

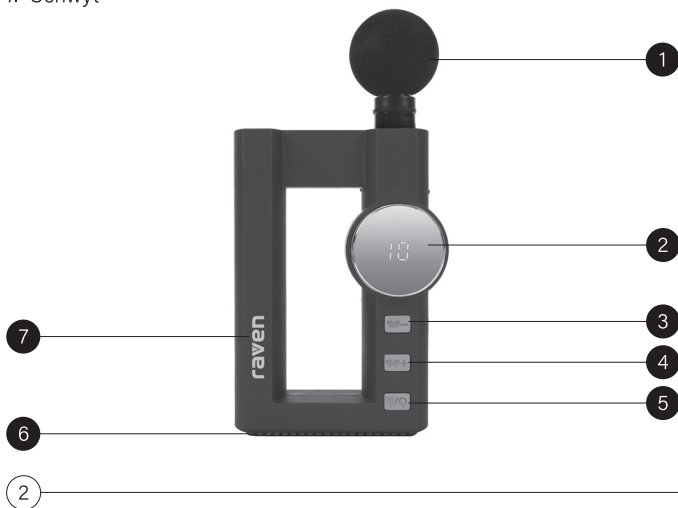

Głowice:

Głowica kulista

Najlepiej sprawdza się w masażu dużych powierzchni (dużych grup mięśniowych) mięśniowych.



Głowica stożkowa

Najlepiej sprawdza się w masażach głębokich tkanek mięśniowych oraz w masażach punktowych.



Głowica w kształcie litery U

Najlepiej sprawdza się w masażu mięśni głębokich w okolicy dolnej części pleców (z wyjątkiem kręgosłupa) lub ścięgna Achillesa.



Głowica płaska

Najlepiej nadaje się do masażu dużych powierzchni na całym ciele. Stosowana głównie do rozluźnienia i kształtowania partii mięśni.



ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem masażera pulsacyjnego (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie mogą używać dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia, oraz są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą czyścić Urządzenia ani go konserwować bez nadzoru osoby dorosłej.

- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.



Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

- W ruchome elementy masujące oraz ich mocowanie nie należy wkładać żadnych części ciała, w szczególności palców.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest ładowane elektrycznie, prądem stałym o napięciu 5 V. Zanim podłączysz Urządzenie do ładowania, sprawdź, czy parametry ładowarki odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy grozi porażeniem prądem.
- Jeśli zostaną zalane elementy zewnętrzne Urządzenia, przed jego włączeniem do sieci elektrycznej dokładnie je wysusz.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym m.in. przewodu zasilającego, jego wtyczki, lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami.
- Nie łam przewodu zasilającego ani go nie ściskaj.

- Nie demontuj ani nie przerabiaj Urządzenia, w tym ładowarki, przewodu zasilającego ani wtyczki. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw reklamacyjnych.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia musi przeprowadzić serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym ładowaniu Urządzenia,
 - przed montażem i demontażem akcesoriów,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją.
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- **Uwaga!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać żadnych przedmiotów do jego wnętrza.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Nie używaj Urządzenia na mokrych powierzchniach.
- Do Urządzenia stosuj tylko oryginalne akcesoria.
- Nie ciągnij Urządzenia ani nie przenoś go, trzymając za przewód zasilający. Nie używaj przewodu jako uchwytu.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory Urządzenia.
- Nie ładuj Urządzenia w pobliżu łatwopalnych tkanin (zasłon, dywanów).
- Nie ładuj Urządzenia w pobliżu źródeł wysokiej temperatury: piecyków gazowych czy kuchenek elektrycznych.
- Używaj Urządzenie tylko do celów, do których jest przeznaczone.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może zagrażać zdrowiu i życiu.

Akumulator i jego ładowanie

- Akumulator należy ładować tylko prądem stałym o parametrach 5 V 2 A.
- W razie planowanej długoterminowej bezczynności Urządzenia zalecamy w pełni naładować akumulator i przechowywać je w suchym miejscu o temperaturze pokojowej.
- Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie lub je konserwować, odłącz je od ładowania.

Niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub pogorszenia jego stanu

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do masażu fizjoterapeutycznego.
- Urządzenie nie służy do celów medycznych ani komercyjnych.

- Nie używaj Urządzenia:
 - jeśli masz rozrusznik serca,
 - do masażu w pobliżu serca,
 - na szyi i głowie,
 - na skórze obrzękniętej, poparzonej, ze stanem zapalnym lub raną,
 - na częściach ciała z siniakami lub jeśli występują ból lub nietypowe reakcje organizmu,
 - na kręgosłupie,
 - po spożyciu alkoholu (ograniczona zdolność percepcji!),
 - na zwierzętach.
- Osoby, które spełniają którykolwiek z poniższych warunków, przed użyciem Urządzenia powinny skonsultować się z lekarzem:
 - kobiety w ciąży,
 - osoby, które niedawno przechodziły operację,
 - osoby posiadające zakrzepy,
 - osoby chorujące na cukrzycę,
 - osoby posiadające wady kręgosłupa, stawów lub kości,
 - osoby z kontuzją mięśni.
- Urządzenie możesz stosować w miejscach przykrytych ubraniami.
- Urządzenie możesz stosować na tkankach miękkich tylko wtedy, gdy osoba masowana nie odczuwa bólu ani innych niepożądanych reakcji.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może zagrażać zdrowiu oraz życiu.

PRZEZNACZENIE

Za pomocą masażera pulsacyjnego możesz samodzielnie wykonać odpężającą masaż ciała sobie lub innym osobom. Masaże działają relaksująco lub pobudzająco i stosuje się je najczęściej przy napięciu mięśni, bólach oraz zmęczeniu.

Masażer pulsacyjny zapewnia mocny, intensywny masaż ud, łydek, barków, ramion i pleców (oprócz kręgosłupa).

Uwaga! Masażer pulsacyjny i głowice nie są urządzeniami medycznymi, lecz aparatami do masażu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Otwórz opakowanie i wyjmij Urządzenie.

Usuń wszystkie elementy jego opakowania.

Upewnij się, czy Urządzenie, głowice i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

1. Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
2. Włóż końcówkę USB-C w gniazdo ładowania na Urządzeniu.
3. Włóż końcówkę USB-A w gniazdo ładowarki (5 V DC 2 A) i podłącz do gniazdka elektrycznego.
4. W trakcie ładowania Urządzenia podświetlenie przycisków będzie migać. Pełne ładowanie powinno trwać około 4 godzin.

5. Po naładowaniu akumulatora podświetlenie przycisków świeci światłem stałym.
6. Wyjmij ładowarkę z gniazdka elektrycznego.
7. Odłącz końcówki przewodu zasilającego od gniazda ładowania Urządzenia i ładowarki.

Uwaga!

- Gdy podczas pracy akumulator jest bliski wyczerpania, podświetlenie przycisków oraz wartość na wyświetlaczu będą migać.
- Podczas ładowania nie możesz korzystać z Urządzenia.
- Nie przekraczaj zalecanego czasu ładowania.
- Ładowanie akumulatorów w skrajnych temperaturach (powyżej 40°C i poniżej 0°C), może negatywnie wpłynąć na trwałość i żywotność akumulatorów.

WSKAZÓWKI

- To normalne, że Urządzenie nagrzewa się podczas ładowania.
- Po pełnym naładowaniu akumulatora Urządzenie może pracować przez około 6 godzin.
- Czas pracy Urządzenia skraca się w miarę starzenia się akumulatorów.

ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE GŁOWICY

Aby zdemontować głowicę, chwyć ją pewnie od spodu i wyciągnij. Aby zamontować głowicę, dopasuj ją do gniazda Urządzenia, a następnie dociśnij do oporu.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

1. Zamontuj wybraną głowicę.
2. Naciśnij włącznik / wyłącznik i przytrzymaj 2 sekundy. Wyświetlacz wskaże wartość 0.
3. Przyciskami plus i minus ustaw żądaną intensywność pulsacji (w zakresie 0–32).
4. Gdy skończysz używać Urządzenia, wyłącz je, wciskając włącznik / wyłącznik i przytrzymując go przez 2 sekundy.

Uwaga!

Po 15 minutach pracy Urządzenie automatycznie wyłączy się. Jeśli potrzebujesz dłuższego masażu, możesz uruchomić Urządzenie ponownie.

Uwaga!

Nie dociskaj Urządzenia zbyt mocno do ciała powodując jego zatrzymanie się. Możesz w ten sposób uszkodzić Urządzenie.

Uwaga!

Pozwól ciału przyzwyczać się do działania masażera – zacznij od krótkich i lżejszych masażu, stopniowo wydłużając ich czas oraz zwiększając nacisk, aż osiągniesz docelowe ustawienia. Masuj wybraną partię ciała nie dłużej niż 60 sekund.

Uwaga!

Podczas pracy wartości na wyświetlaczu mogą falować. Jest to normalne zjawisko związane z amplitudą drgań.

PODGRZEWANIE

1. Gdy uruchomisz Urządzenie, a intensywność pulsacji ustawisz na 0, przyciskiem włącznik / wyłącznik możesz uruchomić panel grzejny.
2. Każde naciśnięcie przycisku włącznik / wyłącznik zmienia wartość na wyświetlaczu i temperaturę panelu zgodnie z poniższą tabelą.

WARTOŚĆ NA WYŚWIETLACZU	TEMPERATURA [°C]
01	40
02	45
03	50
04	55

Uwaga!

Panel grzejny osiąga swoją docelową temperaturę po około 1 minucie.

Uwaga!

Nie używaj panelu grzejnego zbyt długo w jednym miejscu, aby uniknąć ryzyka poparzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zanim zaczniesz czyścić i konserwować Urządzenie, wyłącz je i odczekaj kilka minut do jego ostygnięcia.

Do czyszczenia obudowy używaj zwilżonej, miękkiej szmatki.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Zaleca się przechowywać Urządzenie i transportować je w opakowaniu oryginalnym lub innym, zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
2. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Uwaga!

Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj przewodu zasilającego lub korpusu Urządzenia w wodzie lub innych płynach.

DA NE TECHNICZNE

Model: EMA004

Marka: Raven

Produkt: masażer pulsacyjny

Zasilanie: 5 V DC 2 A

Akumulator: Li-Ion 7,4 V DC 1800 mAh

Moc znamionowa: 25 W

Klasa ochronności: trzecia (zasilanie bardzo niskim napięciem)

Czas ładowania: około 4 godzin

Czas pracy: około 6 godzin

Intensywność pulsacji: 1200–3200 uderzeń/min

Amplituda pulsacji: 7,5 mm

Zestaw: masażer, głowica x 4, przewód zasilający USB-C, instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/30/UE (EMC) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Częścią Urządzenia są akumulatory litowo-jonowe. Akumulatory i baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o ich wyjęciu. Akumulatory i baterie należy wyrzucać w wyznaczonych punktach zbiórki surowców wtórnych. W przypadku problemów z wyjęciem akumulatora lub baterii urządzenie można dostarczyć do centrum serwisowego, którego pracownicy wyjmą i usuną akumulator lub baterię w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

Masażer pulsacyjny

TYP/MODEL

EMA004

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. **Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy masażera pulsacyjnego EMA004 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczętowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczętką firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

raven.pl