



**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
**Elektroniczna waga dla niemowląt**  
**Model: KT-BABY SCALE**





Przed użyciem lub konserwacją wagi dla niemowląt należy przeczytać instrukcję.

## FUNKCJONALNOŚĆ


1. Zakres pomiarowy: 10 g - 20 kg
2. Funkcja tarowania.
3. Automatyczne wyłączenie.
4. Wyświetlanie komunikatu o niskim poziomie baterii

## PARAMETRY TECHNICZNE

1. Zakres pomiarowy: 10 g - 20 kg
2. JEDNOSTKI: KG/LB/ST
3. Dokładność pomiaru: 10g
4. Baterie: 2 x AAA, 1.5V
5. Zalecana temperatura otoczenia: 0° - 40°
6. Wyświetlacz: LCD, 3 jednostki

## FUNKCJE PRZYCISKÓW

- Przycisk ON/OFF/TARE: Włączanie, Wyłączanie, Tarowanie
- Przycisk UNIT: wybór jednostki masy (kg/lb/st).

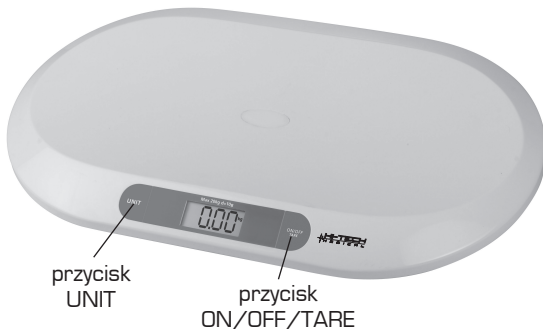

## OBSŁUGA WAGI KT-BABY SCALE

### WAŻENIE DZIECKA BEZPOŚREDNIO NA PLATFORMIE

1. Wyjmij wagę, otwórz pokrywę baterii, włóż baterie do komory baterii, zwracając uwagę na ich polaryzację.
2. Połóż wagę na płaskiej i stabilnej powierzchni.
3. Naciśnij przycisk „ON/OFF/TARE” aby włączyć zasilanie. Po dwóch sekundach na wyświetlaczu pojawi się wartość „0,00”.
4. Naciśnij przycisk „UNIT” i ustaw odpowiednią jednostkę: „kg”, „lb” lub „st”.
5. Połóż dziecko na wadze. Na ekranie wyświetli się masa dziecka.
6. Naciśnij przycisk „UNIT”, aby ustabilizować wskazanie.
7. Naciśnij przycisk „ON/OFF/TARE”, aby wyłączyć zasilanie.

## **WAŻENIE DZIECKA NA KOCYKU, RĘCZNIKU, W PIELUSZCE**

Funkcja tarowania umożliwia zważenie dziecka na ręczniku, kocyku lub pieluszcze. W tym celu należy umieścić na wadze kocyk, ręcznik bądź pieluszkę, nacisnąć przycisk TARA i poczekać 3 sekundy. Następnie należy umieścić dziecko na wadze wraz z kocem, ręcznikiem, pieluszką. Waga wskaże wyłącznie masę dziecka.

## **WYŚWIETLANIE KOMUNIKATÓW O BŁĘDACH**

1. Napis „O-LD” na wyświetlaczu oznacza zbyt duże obciążenie wagi.
2. Napis „LO” na wyświetlaczu oznacza niski poziom baterii. Należy możliwie szybko wymienić baterie.

## **UŻYTKOWANIE I MONTOWANIE BATERII**

1. Przygotuj dwie baterie AAA (alkaliczne 1,5V)
2. Chcąc wymienić baterie, otwórz pokrywę baterii z tyłu urządzenia, włóż dwie baterie AAA do komory baterii (zgodnie ze wskazaną polaryzacją) i szczelnie zamknij pokrywę.
3. Aby waga działała prawidłowo, potrzebne są dwie baterie AAA, które należy umieścić w komorze baterii przed rozpoczęciem użytkowania wagi.

## **UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA**

1. Używaj wagi na czystej i płaskiej powierzchni.
2. Maksymalne obciążenie wagi wynosi 20 kg, włącznie z masą przed tarowaniem.
3. Aby zapewnić długie użytkowanie wagi, nie korzystaj z niej w zbyt wilgotnym, gorącym ani zimnym otoczeniu.
4. Produkt jest wysokoprecyzyjnym urządzeniem do pomiaru masy. Jej nadmierne obciążenie lub upuszczenie z wysokości może spowodować uszkodzenie.

5. Jeśli powierzchnia wagi jest zabrudzona, należy ją oczyścić miękką szmatką bez użycia środków chemicznych, nie pozwalając, aby do wnętrza dostała się woda.
6. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku niekomercyjnego.
7. Jeśli waga pokazuje nieprawidłowy wynik, należy sprawdzić, czy baterie zostały właściwie umieszczone w komorze. Jeśli baterie były używane przez długi czas, wymień je, a następnie sprawdź, czy waga pokazuje prawidłowy wynik. W razie potrzeby skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Gdy produkt jest zużyty, nie wolno traktować go jak zwykłych odpadów domowych, lecz przekazać do odzysku w punkcie utylizacji urządzeń elektrycznych. Sprawdź symbol wskazany na produkcie, w podręczniku użytkownika oraz na opakowaniu. Materiały mogą być poddane odzyskowi zgodnie ze wskazaniem. Nie wyrzucaj zużytych baterii do odpadów domowych. Należy przekazać je do utylizacji jako odpady niebezpieczne lub oddać do wskazanego przez dystrybutora punktu zbioru zużytych baterii. Istotnym działaniem na korzyść środowisku jest ponowne użycie jednostki, recykling jego elementów lub ponowne użycie starych urządzeń w inny sposób. Skontaktuj się z lokalnym organem, aby dowiedzieć się więcej o odpowiednich ośrodkach utylizacji odpadów.





**BIURO HANDLOWE, SERWIS**

ul. Syta 114W

02-987 Warszawa

Telefon: +48 22 88 51 412

Telefon: +48 798 988 588

E-mail: [serwis@kardio-test.pl](mailto:serwis@kardio-test.pl)

[www.kardio-test.pl](http://www.kardio-test.pl)