

Webber<sup>+</sup>  
med

Webber<sup>+</sup>  
med

DEPILAB  
IPL S7



[webber.com.pl](http://webber.com.pl)

Instrukcja obsługi

## Spis treści

|  |    |
|--|----|
| Wprowadzenie .....                         | 02 |
| Przeciwwskazania.....                      | 03 |
| Ważne informacje .....                     | 05 |
| Zasady bezpieczeństwa .....                | 05 |
| Opis urządzenia .....                      | 07 |
| Jak działa technologia IPL .....           | 09 |
| Tabela odcieni skóry i koloru włosów ..... | 10 |
| Spodziewane efekty .....                   | 11 |

### PORADY DOTYCZĄCE OPALANIA

|   |    |
|---|----|
| Opalanie przy użyciu sztucznego lub naturalnego światła słonecznego ..... | 11 |
| Opalanie przy użyciu samoopalaczy .....                                   | 12 |

### PRZED UŻYCIEM

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Przygotowanie skóry ..... | 12 |
| Test na skórze .....      | 13 |

### OBSŁUGA URZĄDZENIA

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Korzystanie z urządzenia .....      | 15 |
| Technologia CoolSkin .....          | 16 |
| Tryb auto i manualny .....          | 16 |
| Zalecany harmonogram zabiegów ..... | 16 |
| Zastosowanie .....                  | 17 |
| Zalecany czas depilacji .....       | 18 |

### PO UŻYCIU

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Częste reakcje skórne ..... | 19 |
|-----------------------------|----|

|  |    |
|--|----|
| Pielęgnacja po zabiegu .....             | 19 |
| Czyszczenie i przechowywanie .....       | 19 |
| Dane techniczne .....                    | 20 |
| Zawartość opakowania .....               | 20 |
| Najczęstsze problemy i rozwiązania ..... | 21 |
| Warunki gwarancji .....                  | 22 |

## Wprowadzenie

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup produktu marki Webber. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania i zachowanie jej na przyszłość.



Technologia intensywnego światła pulsacyjnego (IPL) jest znana jako jedna z najskuteczniejszych metod stałego zapobiegania odrastaniu włosów i jest stosowana w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Dzięki wieloletniemu rozwojowi, ta wykorzystująca specjalnie wyselekcjonowane spektrum światła technologia jest teraz dostępna do użytku domowego. Depilator S7 jest delikatny oraz zapewnia wygodną i skuteczną depilację. Dzięki innowacyjnej funkcji chłodzenia CoolSkin Technology, zabieg depilacji jest praktycznie nieodczuwalny na skórze. Niepożądane włoski to już przeszłość. Ciesz się gładką, aksamitną skórą nawet w miejscach intymnych.



**Zachowaj tę instrukcję przez cały czas użytkowania produktu.**

## Przeciwwskazania

**Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z tabelą odcieni skóry i koloru włosów na stronie 10.**

**Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli nie jest ono odpowiednie dla Twojego odcienia skóry.**

Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli cierpisz na którąkolwiek z chorób wymienionych poniżej:

- Chorobę skóry, taką jak aktywny rak skóry, masz historię raka skóry lub inny zlokalizowany nowotwór.
- Zmiany przedrakowe lub liczne znamiona atypowe.
- Jeśli stwierdzono u Ciebie w przeszłości zaburzenia kolagenu, w tym tworzenie się blizn typu keloid lub słabe gojenie się ran.
- Jeśli stwierdzono u Ciebie zaburzenia naczyniowe, takie jak obecność żyłaków lub ektazji naczyniowej.
- Jeśli Twoja skóra jest wrażliwa na światło i łatwo pojawia się na niej wysypka lub reakcja alergiczna.
- Jeśli na depilowanych obszarach masz: infekcję, egzemę, oparzenia, zapalenie mieszków włosowych, otwarte rany, otarcia, opryszczkę zwykłą, rany, podrażnienia lub zmiany i krwiaki.
- Jeśli w ciągu ostatnich trzech tygodni przeprowadzono u Ciebie zabieg chirurgiczny na obszarach, które mają być depilowane.
- Jeśli masz padaczkę z nadwrażliwością na światło lampy błyskowej.
- Jeśli u Ciebie występuje cukrzyca, toczeń rumieniowaty, porfiria lub zastoinowa choroba serca.
- Jeśli masz jakiegokolwiek zaburzenia krwawienia lub odporności (w tym zakażenia wirusem HIV lub AIDS).

Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przyjmujesz którykolwiek z wymienionych poniżej leków:

- Jeśli Twoja skóra jest obecnie leczona lub w ciągu ostatniego tygodnia używałaś leków lub kosmetyków z: Kwasami alfa-hydroksylowymi (AHA), Kwasami beta-hydroksylowymi (BHA),

miejscowo izotretynoiną i kwasem azelainowym.

- Jeśli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przyjmowałaś jakąkolwiek formę izotretynoiny Accutane lub Roaccutane. Leczenie to może sprawić, że skóra stanie się bardziej podatna na rozdarcia, rany i podrażnienia.
- Jeśli przyjmujesz leki przeciwbólowe, które zmniejszają wrażliwość skóry na ciepło.
- Jeśli przyjmujesz środki lub leki fotouczulające, sprawdź ulotkę dołączoną do opakowania swojego leku i nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jest napisane, że może ono powodować reakcje fotoalergiczne, reakcje fototoksyczne lub jeśli musisz unikać słońca podczas przyjmowania tego leku.
- Jeśli przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe, w tym często przyjmujesz aspirynę w sposób, który nie pozwala na co najmniej 2-tygodniowy okres przerwy przed każdym użyciem depilatora.
- Jeśli przyjmujesz leki immunosupresyjne.

Nigdy nie używaj urządzenia w następujących miejscach:

- Wokół oczu i w pobliżu brwi.
- Na ustach, sutkach, wargach sromowych mniejszych (wewnętrznych), pochwie, odbycie oraz na wewnętrznej stronie nozdrzy i uszu.
- Mężczyźni nie mogą używać go na genitaliach, twarzy, szyi.
- Nad lub w pobliżu wszelkich ciał obcych, które masz w ciele, takich jak: implanty silikonowe, rozruszniki serca, podskórne porty iniekcyjne (dozownik insuliny) lub kolczyki itp.
- Na znamionach, piegach, dużych żyłach, obszarach o ciemniejszej pigmentacji, bliznach, anomaliach skórnych bez konsultacji z lekarzem. Może to spowodować oparzenie i zmianę koloru skóry, co potencjalnie utrudnia rozpoznanie chorób związanych ze skórą.
- Na brodawkach, tatuażach lub makijażu permanentnym. Może to powodować reakcje skórne.
- Na obszarach, gdzie stosuje się dezodoranty o przedłużonym działaniu. Może to wywołać reakcje skórne.

Nigdy nie używaj urządzenia na skórze poparzonej słońcem, niedawno opalanej lub sztucznie opalanej.

**Jeżeli cierpisz na jakiegokolwiek choroby przewlekłe skonsultuj z lekarzem możliwość zastosowania depilatora.**

**Uwaga:** Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych zagrożeń. Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz używać urządzenia, należy skonsultować się z lekarzem.

### Ważne informacje

**Urządzenie i zasilacz należy przechowywać w suchym miejscu. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody znajdującej się w wannie, umywalce, zlewie itp. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie używaj go i skontaktuj się z producentem. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, może to spowodować porażenie prądem.**



**Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.**

### Zasady bezpieczeństwa

**1. Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób w wieku poniżej 16 lat.**

2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez osoby w wieku co najmniej 16 lat, o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych oraz osoby z brakiem doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenie było zrozumiałe. **Dzieci nie mogą bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Emitowane światło laserowe może powodować uszkodzenia wzroku.**

3. Nastolatki w wieku od 16 do 18 lat mogą korzystać z urządzenia za



zgodą i/lub z pomocą rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Zawsze sprawdzaj urządzenie przed jego użyciem. Nie używaj urządzenia ani zasilacza, jeśli któreś z nich jest uszkodzone. Zawsze wymieniaj uszkodzoną część na część zatwierdzoną przez producenta.

5. Nie odcinaj zasilacza, aby zastąpić go inną wtyczką, ponieważ spowoduje to niebezpieczną sytuację.

6. Zasilacz, okienko błysku i nasadki podczas używania mogą stać się gorące. Nie dotykaj zasilacza, okienka błysku i nasadek - poczekaj aż ostygną.

7. Podczas używania urządzenia nie patrz bezpośrednio na błysk. Załóż okulary ochronne, aby chronić oczy.

8. Nie używaj urządzenia, jeśli filtr UV okna błysku jest uszkodzony.

9. Nie używaj nasadek jeśli są uszkodzone.

10. Nie używaj artykułów piśmienniczych, które zawierają ciemny pigment, takie jak ołówek lub długopis do zaznaczania depilowanych obszarów.

11. Nie poddawaj depilacji tego samego obszaru więcej niż jeden raz w trakcie jednego zabiegu, ponieważ nie przyniesie to lepszych efektów, a zwiększy ryzyko skutków ubocznych.

12. Depilacja światłem za pomocą depilatora S7 **nie** powinna być bolesna. Jeśli odczuwasz ból zmniejsz intensywność błysku.

13. Aby zapobiec uszkodzeniu:

- Upewnij się, że nic nie blokuje przepływu powietrza przez otwór wentylacyjny.

- Nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy, nie potrząsaj nim ani nie upuszczaj.

- W przypadku przeniesienia urządzenia z bardzo zimnego otoczenia do bardzo ciepłego lub odwrotnie, przed użyciem należy odczekać około 3 godzin.

- Zadbaj o to, aby nie świecić światłem na inne powierzchnie niż skóra. Może to spowodować poważne uszkodzenie nasadki i/lub okienka błysku. **Produkt jest przeznaczony tylko do użytku na skórze.**

14. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, jak podano w instrukcji obsługi.

15. Urządzenia **nie** należy myć w wodzie Nigdy nie zanurzaj

urządzenia w wodzie i nie płucz go pod bieżącą wodą.

16. Ze względów higienicznych urządzenie może być używane tylko przez jedną osobę.


17. Do czyszczenia urządzenia nie używaj sprężonego powietrza, szorstkich gąbek, ściernych środków czyszczących ani żrących płynów, takich jak benzyna lub aceton.

18. Po użyciu zawsze wyłączaj urządzenie. Nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.


## Opis urządzenia



Nasadka do mniejszych powierzchni

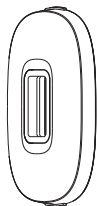

Nasadka do twarzy, pach i okolic bikini

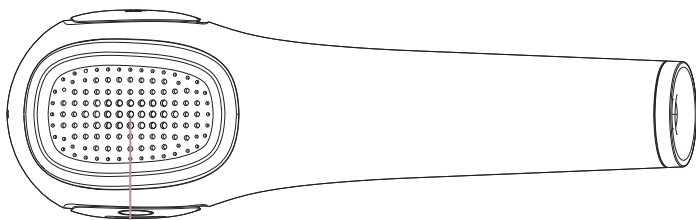

Otwór wentylacyjny

Okno błysku z wbudowanym filtrem UV odpowiednie do stosowania na dużych powierzchniach ciała

Wskaźnik stanu gotowości

Pozostała ilość błysków

Przycisk CoolSkin technology

Wskaźnik CoolSkin technology


Ekran LCD

Wskaźnik poziomu intensywności

Przycisk zasilania / intensywności

Przycisk błysku

Gniazdo zasilacza

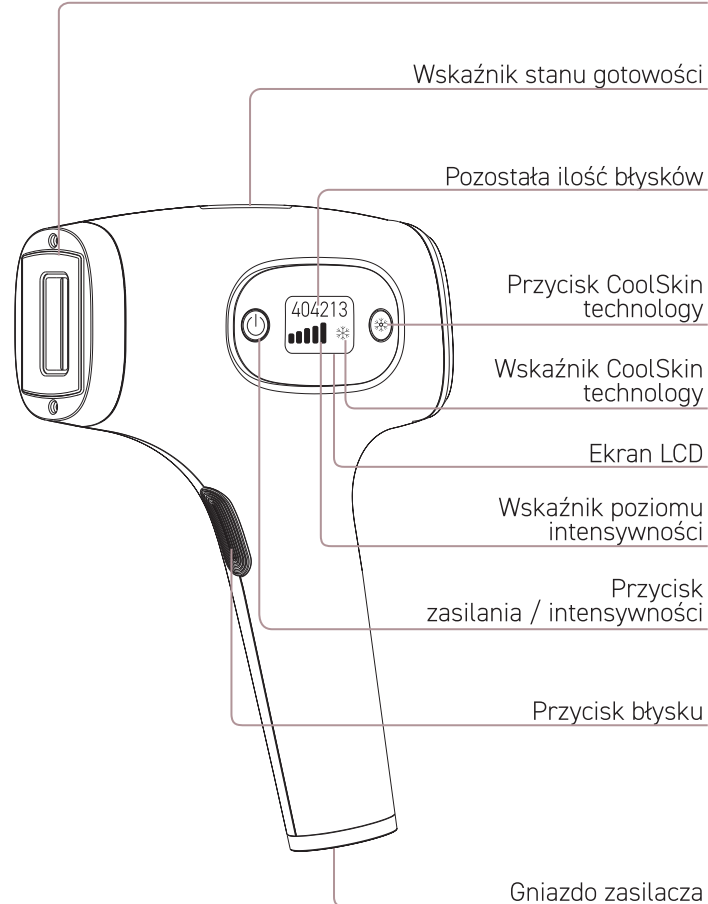

## Jak działa technologia IPL

Dzięki technologii IPL delikatne impulsy światła są aplikowane na skórę i absorbowane przez korzeń włosa. Im ciemniejszy włos, tym lepiej impulsy światła są absorbowane. Impulsy światła stymulują mieszek włosowy do przejścia w fazę spoczynku. W konsekwencji włosy wypadają w sposób naturalny, a odrastanie włosów jest uniemożliwione, pozostawiając skórę stale jedwabiście gładką. Cykl wzrostu włosa składa się z różnych faz. Technologia IPL jest skuteczna tylko wtedy, gdy włos jest w fazie wzrostu. Nie wszystkie włosy znajdują się w fazie wzrostu w tym samym czasie. Dlatego zalecamy 9-zabiegowy harmonogram depilacji, a następnie zabiegi przypominające, aby upewnić się, że wszystkie włosy są skutecznie wydepilowane w fazie wzrostu.

**Uwaga:** Depilacja za pomocą urządzenia może nie być skuteczna w przypadku włosów blond lub jasny blond, ponieważ jasne włosy nie pochłaniają wystarczającej ilości światła.



Depilator IPL uwalnia wiązkę świetlną.



Melanina we włosku absorbuje energię wiązki laserowej i przenosi ciepło do mieszka włosowego.



Następnie mieszek włosowy wejdzie w fazę uśpioną, co powoduje, że włosy etapami przestają rosnąć i wypadają.



Regularne powtarzanie zabiegów zapobiegnie wyrastaniu nowych włosów, co pozostawi skórę gładką w dotyku.

## Tabela odcieni skóry i koloru skóry

|              |         | Odcień skóry |       |        |              |         |                        |
|--------------|---------|--------------|-------|--------|--------------|---------|------------------------|
|              |         | Bardzo jasny | Jasny | Beżowy | Jasnobrązowy | Brązowy | Ciemnobrązowy i Czarny |
| Kolor włosów | Czarny  | ✓            | ✓     | ✓      | ✓            | !       | ✗                      |
|              | Ciemny  | ✓            | ✓     | ✓      | ✓            | !       | ✗                      |
|              | Brązowy | ✓            | ✓     | ✓      | ✓            | !       | ✗                      |
|              | Blond   | ✓            | ✓     | ✓      | ✓            | !       | ✗                      |
|              | Rudy    | ✗            | ✗     | ✗      | ✗            | ✗       | ✗                      |
|              | Biały   | ✗            | ✗     | ✗      | ✗            | ✗       | ✗                      |
|              | Siwy    | ✗            | ✗     | ✗      | ✗            | ✗       | ✗                      |



Odpowiedni

Możesz stosować urządzenie.



Wymaga uwagi

Nie zaleca się stosowania. W przypadku konieczności zastosowania urządzenia dozwolony jest tylko pierwszy poziom mocy (najniższy).



Nieodpowiedni

Nie możesz stosować urządzenia.

## Spodziewane efekty

Po pierwszym zabiegu może upłynąć od 1 do 3 tygodni, zanim włoski zaczną wypadać. W pierwszych tygodniach po pierwszych zabiegach nadal możesz zaobserwować wzrost niektórych włosów. Są to prawdopodobnie włoski, które nie były w fazie wzrostu podczas pierwszego zabiegu. Po 3 - 5 zabiegach powinieneś zauważyć zahamowanie wzrostu włosów. Jednak, aby skutecznie wydepilować wszystkie włoski, należy kontynuować zabiegi zgodnie z zalecanym harmonogramem. Po 3 - 7 zabiegach powinno nastąpić znaczne spowolnienie wzrostu włosów na obszarach, które były poddawane działaniu urządzenia. Zmniejszenie gęstości włosów powinno być również widoczne. W celu utrzymania rezultatów należy kontynuować depilację, wykonując częste zabiegi przypominające (co 4-8 tygodni).

**Uwaga:** Zastąpienie jednego z zabiegów laserowego usuwania włosów w technologii IPL przez inną metodę depilacji (np. wosk) nie przyspieszy spodziewanego zmniejszenia owłosienia.

## Porady dotyczące opalania

### Opalanie przy użyciu sztucznego lub naturalnego światła słonecznego

**Celowe wystawianie skóry na sztuczne lub naturalne światło słoneczne w celu uzyskania opalenizny wpływa na wrażliwość i kolor skóry.** Dlatego ważne jest, aby przestrzegać następujących zasad:

- Po każdym zabiegu należy odczekać co najmniej 48 godzin przed opalaniem. Nawet po upływie 48 godzin należy upewnić się, że skóra poddana zabiegowi nie wykazuje już żadnych podrażnień.
- W przypadku wystawiania skóry na działanie słońca (bez intensywnego opalania) w ciągu 48 godzin po zabiegu, należy stosować krem przeciwsłoneczny SPF 50+ na obszarach poddanych zabiegowi. Po tym okresie, przez dwa tygodnie można stosować

krem przeciwsłoneczny SPF 30+.

- Po intensywnym opalaniu należy odczekać co najmniej 2 tygodnie przed użyciem urządzenia. Wykonaj test skóry, aby określić odpowiednie ustawienie intensywności światła.

Nie należy używać urządzenia na opalonych obszarach ciała.

**Uwaga:** Sporadyczne i pośrednie przebywanie na słońcu nie jest równoznaczne z opalaniem.

### Opalanie przy użyciu samoopalaczy

Jeśli stosowałeś samoopalczy do sztucznego opalania, przed użyciem urządzenia poczekaj, aż sztuczna opalenizna całkowicie zniknie.

## Przed użyciem

### Przygotowanie skóry

1. Przed użyciem urządzenia należy przygotować skórę, usuwając włosy dłuższe niż 1mm z powierzchni skóry. Ułatwi to pochłanianie światła przez włosy znajdujące się pod powierzchnią skóry, co zapewni skuteczne działanie. **Należy włoski wyłącznie golić lub przycinać na krótko.**





**Uwaga:** Jeśli zdecydujesz się na golenie - w przypadku podrażnienia zalecamy nie używać urządzenia dopóki nie ustąpi podrażnienie.

**Uwaga:** Nie używaj wosku ani kremów do depilacji, ponieważ substancje chemiczne mogą powodować reakcje skórne.

2. Oczyść skórę i upewnij się, że jest całkowicie sucha i wolna od substancji olejowych.

**Uwaga:** Gdy włoski przestaną odrastać, co zwykle następuje po 4-5 zabiegach, nie trzeba już wstępnie przygotowywać skóry przed użyciem urządzenia.

## Test na skórze

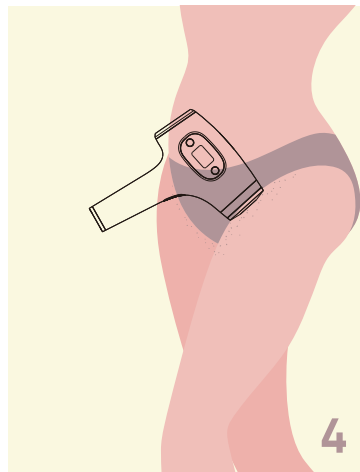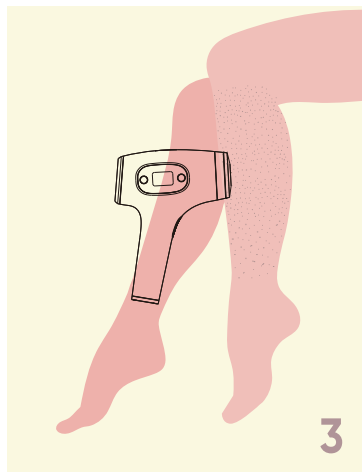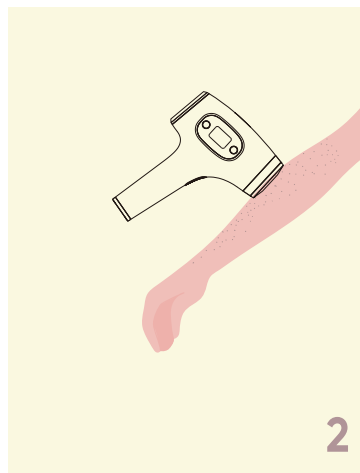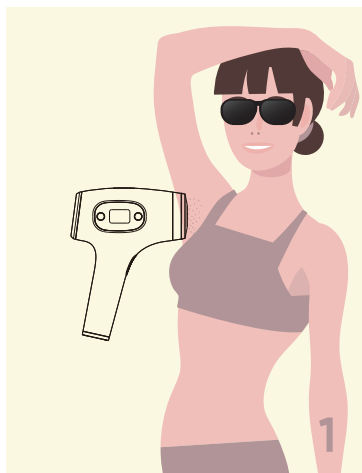

Przy pierwszym użyciu urządzenia lub niedługo po opalaniu (Patrz: Porady dotyczące opalania str. 11) należy wykonać test skórny na każdym obszarze ciała, który ma być poddany zabiegowi. Test ten jest niezbędny do sprawdzenia reakcji skóry na zabieg oraz do określenia właściwego poziomu intensywności światła dla każdego obszaru ciała.

1. Wybierz obszar zbliżony do obszaru, który ma być poddany zabiegowi.

**Uwaga:** Nie wybieraj miejsc najbardziej wrażliwych do testu (miejsca blisko kości, np kostki u stóp, łokci).

2. Włącz urządzenie. Upewnij się, że wybrałeś poziom 1. (Patrz: Korzystanie z urządzenia str. 15)

**Moc poszczególnych poziomów intensywności:**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Poziom 1 | 2,5J/cm <sup>2</sup> |
| Poziom 2 | 3,2J/cm <sup>2</sup> |
| Poziom 3 | 3,8J/cm <sup>2</sup> |
| Poziom 4 | 4,3J/cm <sup>2</sup> |
| Poziom 5 | 5J/cm <sup>2</sup>   |

3. Przyłóż urządzenie do skóry pod kątem 90° i naciśnij przycisk błysku, aby wyzwolić błysk.

4. Przesuń urządzenie po skórze do następnego obszaru, który ma zostać poddany zabiegowi.

5. Zwiększ poziom intensywności o 1 poziom, naciśnij przycisk błysku i przesuń urządzenie do następnego obszaru. Powtórz tę czynność dla wszystkich poziomów.

6. Po przeprowadzeniu testu na skórze, odczekaj 2 godziny i sprawdź, czy na skórze nie wystąpiły żadne reakcje. Jeśli skóra wykazuje reakcje, do depilacji wybierz najwyższy poziom, który nie spowodował reakcji skóry. Test na skórze powinien być przeprowadzony na każdym obszarze, który ma zostać poddany zabiegowi depilacji.


**Uwaga:** Urządzenie wyposażone jest w system bezpieczeństwa (czujnik stanu gotowości - patrz: rysunek na str. 8), który zapobiega przypadkowym błyskom. Urządzenie rozpoznaje ciepło - nie należy stosować do innych powierzchni niż skóra.



## Obsługa urządzenia

### Korzystanie z urządzenia

1. Przed użyciem należy wyczyścić nasadki i okienko błysku.
2. W zależności od depilowanej części ciała umieść odpowiednią nasadkę lub pozostaw urządzenie bez nasadki.
3. Podłącz urządzenie do zasilacza. Następnie włącz zasilacz do gniazdka.
4. Aby włączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk zasilania/intensywności. Naciśnij potem krótko przycisk zasilania/intensywności, aby wybrać odpowiednią intensywność światła w zależności od wyniku testu skórniego.
5. **Założ okulary ochronne, aby chronić oczy.**

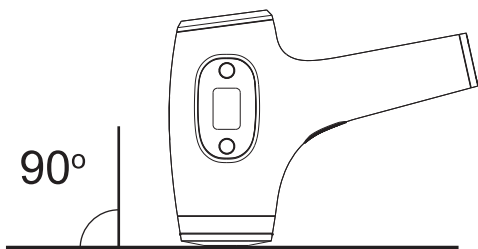

6. Umieść urządzenie pod kątem 90° na skórze, tak aby okienko błysku (lub nasadka) było w całkowitym kontakcie ze skórą.
7. Naciśnij przycisk błysku, aby wyzwolić błysk. Powinno być odczuwalne ciepło spowodowane błyskiem. **Możesz nacisnąć przycisk CoolSkin, aby uruchomić tryb chłodzenia dla ukojenia skóry.**
8. Umieść urządzenie na kolejnym obszarze, który ma być poddany zabiegowi i kontynuuj wyzwalanie błysku.
9. Po zakończonym zabiegu naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania / intensywności, aby wyłączyć urządzenie.

**Uwaga:** Dla zapewnienia bezpieczeństwa urządzenie, wyłącza się automatycznie, jeżeli przez 5 minut żadne przyciski nie są używane.

### Technologia CoolSkin

**Technologia CoolSkin** (Patrz: Opis Urządzenia str. 7), dzięki zastosowaniu najlepszej jakości diod laserowych pozwala na zachowanie bezpieczeństwa na najwyższym poziomie, a dodatkowe chłodzenie głowicy urządzenia wpływa na znaczne zwiększenie komfortu podczas zabiegu. Depilacja jest komfortowa i przyjemna. Głowica schładzana jest nawet do 5°C.

### Tryb auto i manualny

**Tryb manualny (domyślny tryb):** idealny do depilacji małych lub zakrzywionych obszarów, takich jak kolana, pachy czy palce. Wystarczy nacisnąć i zwolnić przycisk sterujący, aby wyzwolić pojedynczy błysk.


**Tryb auto:** naciśnij i przytrzymaj przycisk błysku do momentu, aż wskaźnik intensywności zacznie migać, aby przełączyć się na ten tryb. Oferuje on wygodne zastosowanie na dużych obszarach, takich jak nogi, ponieważ błysk aktywuje się sam po ułożeniu odpowiednio urządzenia i nie musisz nacisnąć przycisku błysku za każdym razem.

### Zalecany harmonogram zabiegów

Pełny cykl usuwania włosów trwa 7-9 zabiegów. Pierwsze trzy zabiegi wykonuj raz w tygodniu. Po trzecim zabiegu zmniejsz ich częstotliwość do jednego na 2 tygodnie. Następnie wykonuj zabiegi przypominające co 4 - 8 tygodni.

**Uwaga:** Odrastanie włosów i wyniki usuwania mogą się różnić w zależności od osoby. Częstsze stosowanie urządzenia niż zalecane nie zwiększy skuteczności.

## Zastosowanie

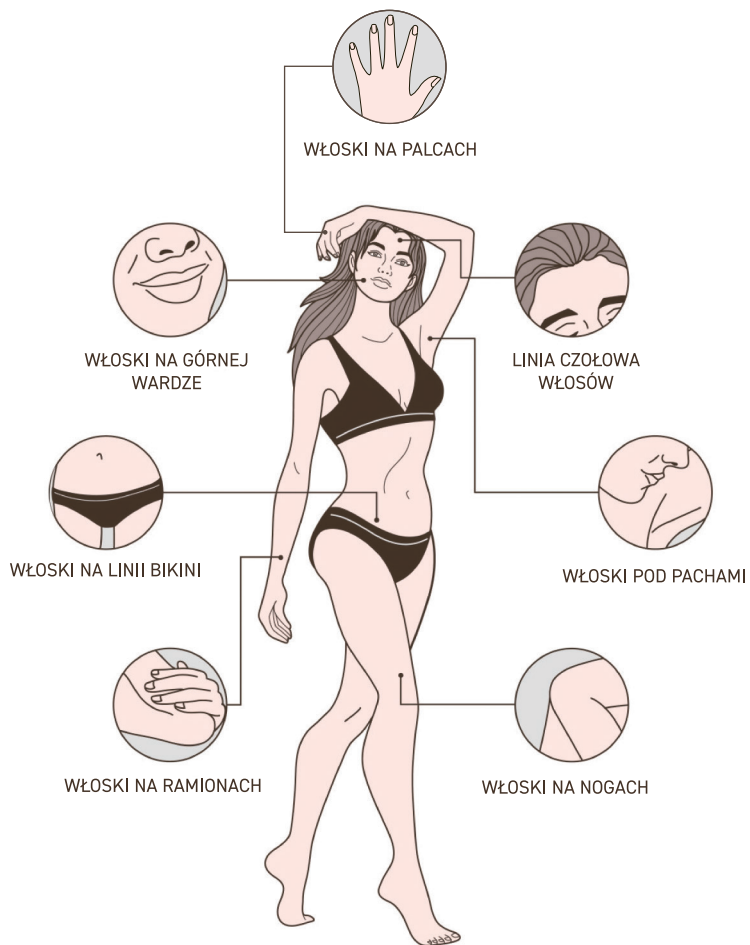

## Zalecany czas depilacji

1 min.

1 min.


1 min.

4 min.

4 min.

14 min.

8 min.

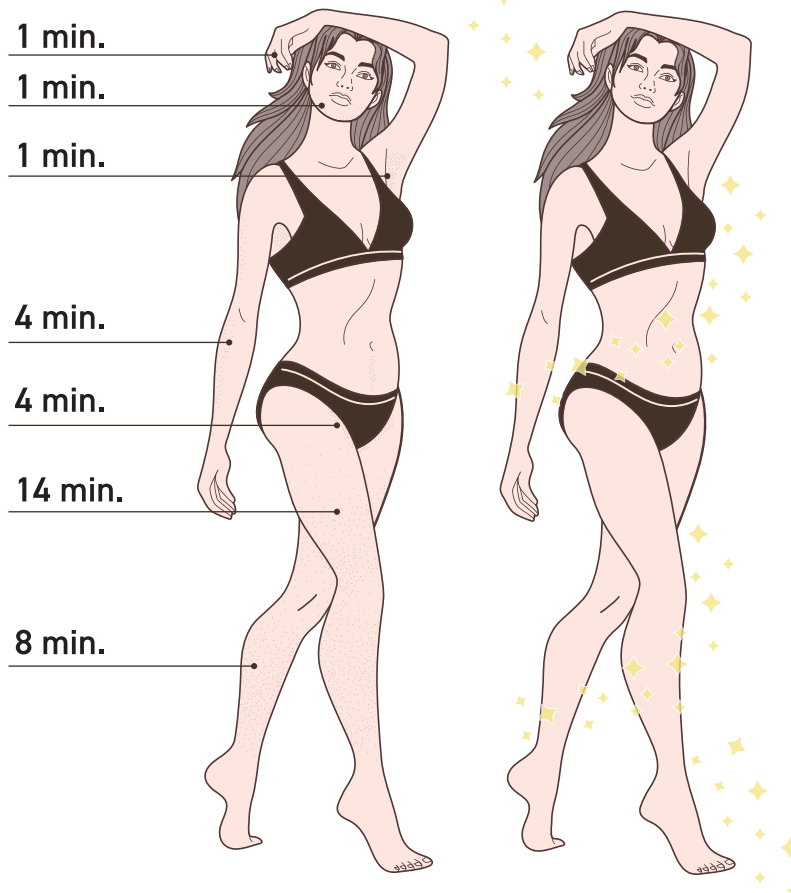

## Po użyciu

### Częste reakcje skórne

Skóra może być lekko zaczerwieniona i/lub może kłuć, mrowić lub być ciepła. Reakcja ta jest całkowicie nieszkodliwa i szybko ustępuje. Suchość skóry i swędzenie mogą wystąpić w wyniku golenia lub połączenia golenia i naświetlania. Zaleca się stosowanie przycisku CoolSkin przez cały czas trwania zabiegu, aby uniknąć takiej reakcji.

### Pielęgnacja po zabiegu

1. Po użyciu można bezpiecznie stosować balsamy, kremy, dezodoranty, kremy nawilżające lub kosmetyki na obszary poddane zabiegowi. Jeśli po zabiegu wystąpi podrażnienie lub zaczerwienienie skóry, przed zastosowaniem jakiegokolwiek produktu na skórę należy poczekać, aż ustąpi. Jeśli po zastosowaniu kosmetyku na skórę wystąpi podrażnienie skóry, należy zmyć go wodą.
2. Unikaj kąpeli oraz prysznica przez 6 godzin po zabiegu. Możesz wykonać depilację tuż przed snem.
3. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego na depilowanej części ciała przez 24 godziny po zabiegu.
4. Delikatne zaczerwienienie i swędzenie występuje rzadko, ale jest to normalne zjawisko. W takim przypadku poczekaj, aż skóra sama się zagoi.
5. Unikaj promieniowania ultrafioletowego podczas użytkowania i natóż krem przeciwśłoneczny przed wyjściem na zewnątrz.

### Czyszczenie i przechowywanie

1. Po użyciu wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i pozwól mu ostygnąć.
2. Zdejmij nasadkę.
3. Użyj wilgotnej, miękkiej szmatki do wyczyszczenia powierzchni urządzenia.

4. Nie rozlewaj alkoholu bezpośrednio na wylot lampy podczas czyszczenia. Do czyszczenia plam używaj wacików lub bezpyłowej ściereczki zanurzonej w niewielkiej ilości alkoholu medycznego (lub używaj wacików z alkoholem).

5. Podczas pracy, na oknie błysku mogą pojawić się czarne plamy z powodu resztek włosów lub brudu pozostawionego na krawędzi. Zachowuj okno błysku czyste przez cały czas.

6. Pozostaw wszystkie części do dokładnego wyschnięcia w wietrzonym pomieszczeniu.

7. Przechowuj urządzenie w suchym i wolnym od kurzu miejscu.

8. Upewnij się, że urządzenie znajduje się z dala od miejsc z silnym polem magnetycznym, wilgocią, dużym zapyleniem lub wysoką temperaturą, a także z dala od urządzeń elektronicznych (takich jak komputer). Nie uderzaj ani nie stukaj w urządzenie.

9. Poza autoryzowanym serwisem, osoby postronne nie mogą otwierać urządzenia, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem. Zabronione jest również wykonywanie czynności naprawczych poza autoryzowanym serwisem.

### Dane techniczne

Moc wejściowa: 48W

Napięcie znamionowe zasilacza: AC 100 - 240V/5A

Napięcie wyjściowe zasilacza: DC 12V/4A

Moc wyjściowa: 48W

Zakres częstotliwości znamionowych: 50/60Hz

Sprawność zasilacza: 86,43%

Zużycie energii bez obciążenia: 0,3W

Temperatura przechowywania: 1°C - 45°C

Temperatura pracy: 10°C - 35°C

Wilgotność robocza: 25%- 75%

Zakres energii: 2,5J - 5J

Zakres długości fal świetlnych: 510nm - 1200nm

Ilość błysków: 500 000

Poziomy mocy błysku: 5

Masa netto: 620g


## Zawartość opakowania

- |                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 x Urządzenie do usuwania włosów IPL | 1 x Pokrowiec na urządzenie |
| 1 x Nasadka do mniejszych powierzchni | 1 x Zasilacz                |
| 1 x Nasadka do pach i okolic bikini   | 1 x Instrukcja obsługi      |
| 1 x Okulary ochronne                  |                             |

## Najczęstsze problemy i rozwiązania

| Problem  | Możliwe przyczyny  | Rozwiązania  |
|--|--|--|
| Nie można uruchomić urządzenia.                      | Zasilacz nie jest podłączony.  | Upewnij się, że zasilacz lub przewód zasilający jest podłączony do gniazda.  |
| Zasilacz jest gorący podczas pracy.                  | To normalne zjawisko.  | Nie są wymagane żadne działania.   |
| Plamy znalezione na krawędzi wylotu lampy błyskowej. | Włosy lub brud pozostawione na krawędzi i poparzone podczas pracy.               | Użyj wacików z alkoholem, aby oczyścić krawędź przed rozpoczęciem pracy.   |
| Efekt nie jest zadowalający.                         | Stopień intensywności światła jest zbyt niski. Działanie nie jest wystarczające. | Dostosuj odpowiedni stopień. Skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.                                     |
| Oświetlenie wywołuje alergię.                        | Stopień intensywności światła jest zbyt wysoki.                                  | Dostosuj odpowiedni stopień. Skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.                                     |
| Brak błysku.   | Okno błysku nie jest całkowicie zakryte przez skórę.                             | Upewnij się, że okno błysku tworzy kąt 90 stopni na skórze.  |
| Na ekranie wyświetla się ERR3.                       | Automatyczna ochrona przed przegrzaniem.   | Umieść urządzenie w miejscu wentylowanym, aby ostygło.   |
| Osobliwy zapach towarzyszący oświetleniu.            | Wylot lampy jest brudny lub pokryty kurzem. Włoski nie są odpowiednio ogolone.   | Użyj wacika z alkoholem, aby oczyścić krawędź. Upewnij się, że włosy są ogolone do samej nasady i nie pozostają na skórze. |

\* zastrzegamy sobie prawo do zmian i błędów drukarskich

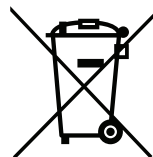

**Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).**

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno.

### URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE

Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

## Warunki gwarancji

Na wszystkie urządzenia udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie przez producenta na terenie Polski. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania, najszybszym oraz najwygodniejszym sposobem będzie wypełnienie formularza online dostępnego na stronie: [www.webber.com.pl/reklamacje](http://www.webber.com.pl/reklamacje).

Reklamacje można również składać telefonicznie pod numerem telefonu: 61 102 04 87 lub w sklepie stacjonarnym, w którym dokonano zakupu, wystarczy przedstawić dowód zakupu.

**Do przesyłki należy dołączyć dokładny opis usterki oraz dane kupującego.**

W przypadku wątpliwości co do właściwego działania urządzenia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym działem serwisu: [serwis1@metrex.com.pl](mailto:serwis1@metrex.com.pl), 61 102 04 83. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rekojmii za wady rzeczy sprzedanej.

**Nie przyjmujemy przesyłek reklamacyjnych za pobraniem.**

**Producent: PHU Metrex**  
ul. Grunwaldzka 229,  
60-179 Poznań, PL  
[www.metrex.com.pl](http://www.metrex.com.pl)

