



inFace BF-06E

Instrukcja obsługi

Zapraszamy do korzystania z inFace

inFace 5 in 1 Facial Beauty Device jest niezależnie opracowany i wyprodukowany przez Shenzhen inFace Technology Co., Ltd., który jest powiązany z Shenzhen Migoosmart Co., Ltd.. Od momentu założenia firmy, została ona zaprojektowana w oparciu o podstawowe koncepcje praktyczności, funkcjonalności i bezpieczeństwa, dążąc do stworzenia produktów z technologią i intelektem oraz dążąc do odkrywania i wprowadzania innowacji.

Funkcje produktu

Głębokie oczyszczanie | Import i eksport | Lifting i ujędrnianie | Spłycenie zmarszczek | Ukojenie skóry

Środki ostrożności

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

-Należy upewnić się, że do ładowania używany jest dedykowany kabel ładowania inFace dostarczony z tym produktem, aby uniknąć nieprawidłowego działania.

-Proszę używać tego produktu z ostrożnością, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią.

-Nie nadaje się dla osób, które przeszły operacje plastyczne twarzy lub posiadają podskórne metalowe implanty.

-Nie należy go stosować, jeśli w miejscu pielęgnacji występują jakiekolwiek choroby skóry, np. owrzodzenia, grzybica, wysypka itp.

-Nie jest odpowiedni dla osób z silnymi oparzeniami słonecznymi i hiperplazją blizn w obszarze pielęgnacyjnym.

-Nie powinno się stosować tego urządzenia, jeżeli posiada się urządzenia elektroniczne, takie jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca lub wewnętrzne defibrylatory w ciele.

-Osoby stosujące terapię hormonalną, terapię skóry lub przyjmujące leki immunosupresyjne nie powinny go używać.

-Po wszelkich zabiegach chirurgicznych, przed użyciem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

-Ten produkt powinno się stosować na twarzy i szyi. Nie należy go stosować na ranach, obszarach chirurgii plastycznej, obszarach limfatycznych, wewnątrz ust, powiek, gałek ocznych i wokół oczu (z wyjątkiem trybu RF).

-Podczas stosowania tego produktu należy dobrać odpowiednie produkty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem trybu chłodzenia), nie należy go stosować bez żadnych produktów do pielęgnacji skóry.

-Ten produkt posiada funkcję podgrzewania. Podczas używania trybu z funkcją podgrzewania nie należy pozostawać na tym samym obszarze dłużej niż 3 sekundy, aby uniknąć dyskomfortu skóry.

-Proszę umieścić produkt w chłodnym i suchym miejscu. Nie umieszczać w wilgotnym miejscu, takim jak łazienka, aby uniknąć nieprawidłowego działania, np. zwarcia.

-Tego produktu nie można myć ani zanurzać w wodzie. Po użyciu należy wytrzeć główkę produktu wilgotną chusteczką lub szmatką. Zabrania się czyszczenia produktu za pomocą rozpuszczalników organicznych, takich jak benzyna i rozcieńczalnik.

-Nie należy silnie uderzać albo upuszczać tego produktu.

-Nie należy przechowywać ani używać tego produktu w miejscach, w których występują silne pola magnetyczne i fale elektryczne.

-Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z tego produktu, należy go przechowywać poza ich zasięgiem.

-Nie należy demontować ani naprawiać tego produktu samodzielnie, należy skontaktować się z dostawcą produktu.

Parametry produktu

Nazwa produktu: inFace 5 w 1

Model: BF-06E

Rozmiar produktu: 170.8 x 47.9 x 42.4 mm

Waga netto: Około 170g

Pojemność akumulatora: 1500mAh

Poziom siły: 3 poziomy

Napięcie wejściowe: 5V

Moc wejściowa: 6W

Napięcie znamionowe: 3.7V

Moc znamionowa: 6,6W


Czas ładowania: około 2 godziny

Czas użytkowania: około 50 minut

Informacje o produkcie

Zawartość opakowania:

- 1- Urządzenie inFace 5 w 1 BF-06E *1
- 2- Magnetyczny kabel do ładowania *1
- 3- Pierścienie mocujące waciki bawełniane *1
- 4- Instrukcja obsługi *1

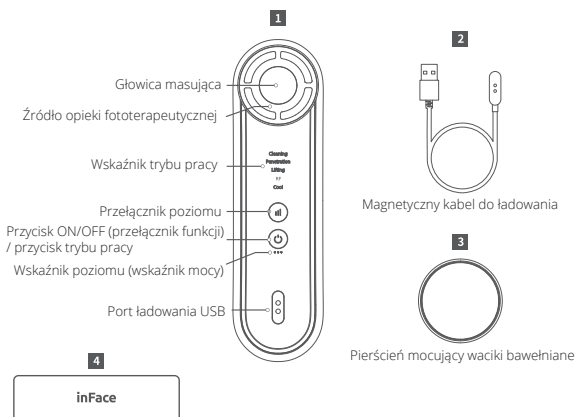

Uwaga: Zdjęcia produktów i opisy odpowiednich funkcji przedstawione w niniejszej instrukcji, jak również objaśnienia niektórych rzeczowników, mogą być wykorzystane jedynie jako pomoc w ocenie produktu, użytkownicy powinni bazować swoją opinię na rzeczywistym obiekcie. W związku z konsekwentną polityką ciągłego ulepszania produktów inFace, zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów bez uprzedniego powiadomienia.

Instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu proszę oczyścić powierzchnię skóry.


Tryb czyszczenia

Unikalna funkcja przerywanej vibracji i podgrzewania może szybko otworzyć pory. Jony dodatnie pomagają usunąć głęboki brud i poprawić różne problemy skórne spowodowane przez niewłaściwe czyszczenie. Podczas mycia będzie świecić czerwona dioda. Nie powinno się zbyt mocno dociskać produktu do skóry.

1. Wyczyścić za pomocą tonera: Zamocuj waciki na głowicy masującej za pomocą pierścienia mocującego i zwilż go tonerem, a następnie nałóż toner na twarz okrężnymi ruchami.

*Częstotliwość używania: 2-3 razy w tygodniu, w wypadku skóry wrażliwej można odpowiednio zmniejszyć częstotliwość stosowania.

*Czas stosowania: nie więcej niż 3 minuty na raz, 1-2 minuty na raz dla skóry wrażliwej.

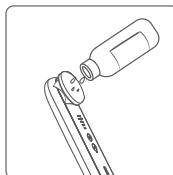

Tryb nawilżania

Wibracje o wysokiej częstotliwości i funkcja ogrzewania pomagają otworzyć pory skóry. Jony ujemne pomagają produktom do pielęgnacji skóry i składnikom odżywczym maseczki przeniknąć głęboko w skórę twarzy. Podczas używania tego trybu, świeci pomarańczowa dioda. Nawilżanie może osiągnąć efekt odmłodzenia, rozjaśniania oraz poprawy matowości i szorstkości skóry.

1. Użyj z tonerem, balsamem, kremem lub olejkiem eterycznym: Nałóż toner, balsam, krem lub olejek na twarz i szyję. Przesuń głowicę masującą głowicę z dołu do góry wzdłuż konturów twarzy i szyi. Należy unikać obszaru limfatycznego podczas korzystania z tej metody.



2. Użyj z maseczką na twarz: Nałóż maseczkę na twarz i pociągnij głowicę masującą od dołu do góry wzdłuż konturu twarzy. Należy unikać obszaru limfatycznego podczas korzystania z tej metody.

*Częstotliwość stosowania: stosować raz dziennie rano i wieczorem, w przypadku skóry wrażliwej można odpowiednio zmniejszyć częstotliwość stosowania.

*Czas użytkowania: Nie więcej niż 3 minuty na raz z tonerem, balsamem, kremem lub olejkiem eterycznym, a zakończyć stosowanie po całkowitym wchłonięciu. Nie należy przesuwac urządzenia bez żadnego produktu do pielęgnacji skóry; nie więcej niż 6 minut na raz z maseczką do twarzy.

Tryb liftingujący

Mikroprąd i czerwone światło wspomagają regenerację kolagenu i podnoszą kontury twarzy.

1. Stosować z esencją, balsamem, olejkiem eterycznym lub żelem: Po zastosowaniu produktu do pielęgnacji skóry na twarzy, proszę użyć głowicy masującej od dołu do góry wzdłuż konturu twarzy.

*Częstotliwość stosowania: 2-3 razy w tygodniu, w przypadku skóry wrażliwej można odpowiednio zmniejszyć częstotliwość stosowania.

*Czas stosowania: nie więcej niż 3 minuty na raz, w przypadku skóry wrażliwej przez 1-2 minut na raz, Po wchłonięciu się produktu pielęgnacyjnego, można go uzupełnić, nie używać bez produktu do pielęgnacji skóry.



Tryb RF

Funkcja ukierunkowanej częstotliwości radiowej (RF) pomaga produktom do pielęgnacji skóry lepiej się wchłaniać, zapobiega tworzeniu się cząsteczek tłuszczu pod oczami oraz poprawia wygląd oczu i drobnych linii twarzy.

1. Poziom 1 - Stosowanie z kremem pod oczy: Nałóż krem pod oczy na okolice oczu. Użyj głowicy masującej, aby naciskać lub masować okrężnymi ruchami wokół oczu.



2. Poziom 2 - Stosowanie z produktami do pielęgnacji skóry lub żelami do stosowania na czoło: Nałóż produkty do pielęgnacji skóry na czoło i użyj głowicy masującej. Podczas masowania czoła, przesun głowicę urządzenia tak, żeby twoje ruchy naśladował kształt litery "W".



3. Poziom 3 - Stosowanie z produktami do pielęgnacji skóry lub żelami w celu nałożenia na policzki i fałdy nosowo-wargowe: Nałóż produkty do pielęgnacji skóry na policzki i fałdy nosowo-wargowe, a następnie użyj głowicy masującej w ruchach okrężnych na twarzy.



*Częstotliwość stosowania: 3-4 razy w tygodniu, w przypadku skóry wrażliwej można zmniejszyć częstotliwość stosowania.

*Czas użytkowania: Czas jednorazowego użycia nie powinien przekraczać 3 minut na raz, nie używaj więcej kremu pod oczy lub produktów do pielęgnacji skóry po jego wchłonięciu, nie używaj urządzenia bez żadnego produktu do pielęgnacji skóry.

Tryb chłodzenia

Tryb chłodzenia może przyspieszyć kurczenie się porów i zablokować wilgoć i składniki odżywcze w skórze. Niebieskie światło pomaga uspokoić skórę i złagodzić stany zapalne trądziku. Do użycia nie jest wymagany żaden produkt do pielęgnacji skóry.

1. Umieść głowicę masującą blisko twarzy i użyj jej z punktowym naciskiem.

*Częstotliwość stosowania: stosować po każdym zabiegu.

*Czas użytkowania: Nie więcej niż 3 minuty na raz.

Obsługa urządzenia

1. Dłuższe przytrzymanie przycisku "ON / OFF (przełącznik funkcyjny)" przez 1,5 sekundy powoduje włączenie/wyłączenie urządzenia.

2. Naciśnij krótko przycisk "ON / OFF (przełącznik funkcyjny)", aby przełączyć tryb. (Czyszczenie - nawilżanie - lifting - RF - chłodzenie)

3. Naciśnij krótko przycisk poziomu, aby przełączyć poziom. (niski - średni - wysoki)

4. Czas pracy tego urządzenia wynosi 3 minuty w każdym trybie. Po 3 minutach produkt przechodzi w stan czuwania. Krótkie naciśnięcie przycisku "ON / OFF (przełącznik funkcyjny)" powoduje przejście urządzenia do następnego trybu w celu rozpoczęcia pracy. Jeśli przez 1 minutę nie będzie wykonywana żadna czynność, urządzenie wyłączy się automatycznie po trzech sygnałach dźwiękowych. (W trybie chłodzenia, produkt wyłączy się automatycznie i odtworzy trzy sygnały dźwiękowe po pracy przez 3 minuty).

Porady

- Podczas użytkowania należy trzymać metalowy pasek czujnika z tyłu produktu. Kiedy głowica masująca dotyka skóry, zostanie utworzony obwód z ludzkim ciałem.


- Jeśli urządzenie jest używane na twarzy innej osoby, musi się ono stykać z ciałem użytkownika, aby utworzyć obwód między produktem a użytkownikiem, w przeciwnym razie produkt nie może działać normalnie.

- Tryb czyszczenia może być używany z tonerem. Głowica produktu jest wodoodporna, ale korpus nie jest. Proszę nie splukiwać korpusu bezpośrednio lub umieszczać go w wodzie.


- Po użyciu trybu chłodzenia, produkt będzie sam odprowadzał ciepło. Normalnym zjawiskiem jest nagrzewanie się głowicy produktu. Jeśli chcesz kontynuować korzystanie z trybu chłodzenia, wyłącz urządzenie na minimum 30 minut, aby uniknąć przegrzania.

Instrukcje dotyczące ładowania


Gdy akumulator produktu jest prawie rozładowany, usłyszysz pięć sygnałów dźwiękowych i wskaźnik akumulatora zacznie migać. Po zakończeniu sygnału dźwiękowego, produkt wyłączy się automatycznie. Proszę naładować produkt przed ponownym użyciem.

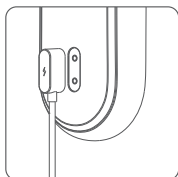

Podczas ładowania, proszę ustawić magnetyczny kabel ładowania z magnetyczną ssawką z przodu urządzenia, i upewnij się, że całe urządzenie jest suche.

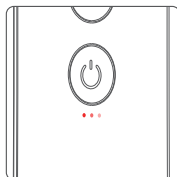

Podczas ładowania, wskaźnik poziomu naładowania miga na przemian.

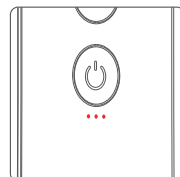

Po pełnym naładowaniu, wskaźnik poziomu naładowania zaświeci się w pełni. Można używać urządzenia normalnie po odłączeniu kabla ładowania.

Pytania i odpowiedzi

Jeśli podczas użytkowania urządzenia wystąpi problem, należy zapoznać się z poniższą tabelą. Jeśli nie można rozwiązać problemu własnoręcznie, prosimy o kontakt z serwisem posprzedażowym.

P: Głowica masująca nie wibruje.

O: Sprawdź, czy usunięto folię ochronną głowicy masującej i folię ochronną paski metalowego z tyłu korpusu. Usuń folię ochronną przed użyciem; palce powinny przytrzymywać metalowy pasek czujnika z tyłu urządzenia podczas użytkowania, tak aby głowica masująca stykała się ze skórą i tworzyła obwód z ciałem człowieka.

P: Głowica masująca nie wibruje, gdy jest używana na twarzy innej osoby.

O: Kiedy używana jest na twarzy drugiej osoby, musi się ona stykać z ciałem użytkownika, aby utworzyć pętlę, w przeciwnym razie produkt nie będzie działał prawidłowo.

P: Jak czyścić po użyciu?

O: Po użyciu proszę wytrzeć głowicę produktu wilgotną chusteczką lub szmatką.

P: Brak reakcji podczas ładowania.

O: Możesz wykonać poniższe kroki, aby odnaleźć problem:

- 1) Podczas ładowania sprawdź, czy wyświetlacz zasilania miga;
- 2) Sprawdź, czy kabel ładowania i wtyczka są prawidłowo włożone;
- 3) Sprawdź, czy kabel ładowania jest uszkodzony.

Q: Jak długo trwa ładowanie?

A: Czas ładowania tego produktu wynosi około 2 godziny. Nie można używać produktu podczas ładowania.

Q: Produkt wyłącza się automatycznie.

A: Każdy tryb pracy tego produktu trwa przez 3 minuty. Po 3 minutach produkt przechodzi w stan gotowości. Jeśli w ciągu 60 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, produkt wyłączy się automatycznie. Jeśli chcesz kontynuować pracę, przytrzymaj przez 1,5 sekundy przycisk "ON /OFF (przełącznik funkcyjny) / przycisk trybu", aby włączyć urządzenie.

Ochrona i serwis po sprzedaży

1. inFace udziela rocznej gwarancji na standardowy serwis produktów. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu.

2. W okresie gwarancji, w przypadku awarii produktu spowodowanej wadami w materiale lub procesie produkcyjnym, wymienimy części lub cały produkt w zależności od potrzeb.

3. Aby ubiegać się o gwarancję, produkt oraz dowód zakupu (faktura), który może potwierdzić datę zakupu, musi być przekazany do sprzedawcy.

4. Gwarancją nie są objęte następujące warunki:

A. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, na przykład: używanie niewłaściwego zasilania, włożenie produktu do nieodpowiedniego gniazdka, uszkodzenia spowodowane przez człowieka, itp.

B. Zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem produktu.

C. Używanie produktu do innych celów, niewłaściwej obsługi lub nieprofesjonalnej konserwacji oraz używanie akcesoriów nie należących do naszej firmy, co skutkuje problemami z produktem.

D. Materiały eksploatacyjne, akcesoria itp.

E. Uszkodzenia spowodowane przez czynniki siły wyższej (takie jak piorun, trzęsienie ziemi, powódź, itp.).

Ochrona środowiska

1. Ten produkt, opakowanie i akcesoria są stworzone z materiałów nadających się do recyklingu.

2. Podziel odpady na różne poziomy recyklingu, aby ułatwić recykling użytecznych materiałów.

Utylizacja odpadów

Etykieta na tym produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu wskazuje, że produkt nie można wyrzucać w sposób niezgodny z przepisami. Należy skontaktować się z lokalnymi władzami w celu przeprowadzenia recyklingu zgodnie z klasyfikacją odpadów. Przed wyrzuceniem urządzenia należy wyjąć z niego akumulator.

Podczas wyjmowania akumulatora należy wyłączyć zasilanie urządzenia. Akumulator musi zostać bezpiecznie zutylizowany.



inFace

Product Name: inFace 5 in 1
Facial Beauty Device
Product Model: BF-06E
Production Date: _____
Quality Inspection: _____

Shenzhen Migoosmart Co., Ltd.



Tel: 0086-400-007-8388

Serwisowe konto WeChat: migoosmart

Godziny pracy: 9:00-18:00 od poniedziałku do soboty
(Czas Chin, dzień wolny w święta i weekend)

Informacje o firmie: Shenzhen Migoosmart Co, Ltd.

Adres: Rm.807, Building U6, Junxiang U8 Intelligent Manufacturing Industrial Park,
Gushu Community, Xixiang Sub-District, Bao' an District, Shenzhen, China

E-mail: service@migoosmart.com

Kod pocztowy: 518000

Oficjalna strona internetowa: www.migoosmart.com

* Prawo do ostatecznej interpretacji należy do Shenzhen Migoosmart Co, Ltd.



Oficjalna strona
internetowa



Serwisowe
konto WeChat

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowaniem. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu.