



Gratulujemy, ponieważ właśnie uczyniłeś pierwszy krok w drodze do zdrowych i bielszych zębów!

**Profesjonalna Szczoteczka Soniczna S·E·Y·S·S·O łączy w sobie funkcjonalność i staranność wykonania.**

Została starannie zaprojektowana przez europejskich lekarzy dentystów, tak aby zapewnić Tobie i Twojej rodzinie zupełnie nową jakość szczotkowania.

Jej powłoka wykonana jest z wysokiej jakości, przyjemnego w dotyku materiału. Profesjonalna Szczoteczka Soniczna posiada delikatne i miękkie włókna, które poruszają się z dużą prędkością zapewniając doskonałe rezultaty mycia zębów.

Aby bezpiecznie korzystać z rewelacyjnej technologii sonicznej oferowanej przez S·E·Y·S·S·O, uważnie przeczytaj instrukcję przed użyciem szczoteczki!

## ELEMENTY ZESTAWU

- 2 końcówki
- Rękojeść
- Stacja ładująca z dwoma miejscami na końcówki
- Magnetyczne Etui Podróżne z funkcją ładowania przez kabel USB
- Kabel USB

## PODŁĄCZANIE I ŁADOWANIE

- Umieść Szczoteczkę na ładowarce i podłącz wtyczkę ładowarki do kontaktu.
- Dioda wskaźnika ładowania (Charge) powinna się zaświecić.
- Migająca dioda (Charge) sygnalizuje ładowanie. Jeśli dioda świeci ciągłym światłem oznacza to, że szczoteczka została naładowana w pełni.
- Pierwsze pełne ładowanie zajmuje co najmniej jedną dobę i starcza do 6 tygodni, czyli 84 cykle szczotkowania.
- Każde kolejne ładowanie powinno trwać maksymalnie do jednej doby.
- Podczas ładowania można zdjąć szczoteczkę z ładowarki na czas mycia zębów.
- Po dwuminutowym czasie mycia zębów możesz odstawić szczoteczkę na ładowarkę ponownie.
- Nie ma ryzyka przeładowania baterii.
- Nie zaleca się rozładowywania baterii do końca, dlatego rekomendujemy ładowanie jej co 4-5 tygodni.

# UŻYTKOWANIE PROFESJONALNEJ SZCZOTECZKI SONICZNEJ S·E·Y·S·S·O

Umieść końcówkę na rękojeści. Następnie, nałóż odpowiednią ilość pasty na włókna szczoteczki. Rekomendujemy stosowanie pasty dedykowanej dla szczoteczek sonicznych (Sonic-Friendly). Polecamy pastę S·E·Y·S·S·O Protection and Safe Whitening, która dzięki idealnemu składowi i konsystencji w pełni wykorzysta potencjał szczoteczki sonicznej. Przed włączeniem szczoteczki umieść końcówkę w jamie ustnej. Profesjonalna Szczoteczka Soniczna została zaprojektowana tak, aby dokładnie oczyszczać zęby w ramach zalecanego przed lekarzy dentyków czasu szczotkowania. Po dwóch minutach urządzenie wyłączy się automatycznie i jest gotowe do ponownego użycia.

## Nakładanie i zdejmowanie końcówki

Końcówki szczoteczki muszą być ściśle dopasowane do rękojeści, aby przenieść szybkie ruchy i w pełni wykorzystać moc działania technologii sonicznej. Przed pierwszym użyciem szczoteczki należy nanieść cienką warstwę środka natłuszczającego na metalowy bolec rękojeści, aby ułatwić nakładanie i zdejmowanie końcówki. Rekomendujemy wymianę końcówek co 3 miesiące.

## Innowacyjna prędkość

Trzy tryby pracy pozwalają na dostosowanie szczoteczki do Twoich indywidualnych potrzeb. Szczoteczka porusza się aż w trzech prędkościach wykonując 62 000, 82 000 lub 96 000 ruchów na minutę w ramach trybów: Soft, Clean i Whitening.



# JAK ZMIENIAĆ TRYBY PRACY:

Przycisk wyboru trybu pracy kontroluje też włączanie i wyłączenie szczoteczki. Dzięki niemu możemy zmieniać prędkość pracy kolejno między: Clean, Soft i Whitening. Użyj przycisku, żeby włączyć urządzenie, następnie naciskaj dalej, by przechodzić między trybami pracy szczoteczki. Jeżeli tryb będzie aktywny więcej niż 5 sekund, następnym użyciu przycisku wyłączy urządzenie.

## Profesjonalna Szczoteczka Soniczna włącza się w trybie Clean.

- Żeby przejść z trybu Clean na tryb Soft naciśnij przycisk wyboru funkcji pracy drugi raz.
- Żeby przejść do trybu Whitening naciśnij go jeszcze raz.
- Dioda wskaźnika trybu pracy pokazuje, który tryb jest aktualnie stosowany.
- Po 5 sekundach następuje zapamiętanie trybu pracy i kolejne użycie przycisku wyłączy szczoteczkę.





## KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

---

- Po umyciu zębów, opłucz szczoteczkę pod bieżącą wodą.
- Zdejmij końcówkę z rękojeści i opłucz ją pod bieżącą wodą.
- Wytrzyj rękojeść zanim odłożysz ją na ładowarkę.
- Zanim przystąpisz do czyszczenia ładowarki, upewnij się, że jest ona odłączona od zasilania. Do wycierania powierzchni ładowarki używaj tylko suchej szmatki!

**Ważne:** Nie myj ładowarki pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj jej w wodzie.

- Trzymaj ładowarkę w czystym i bezpiecznym miejscu.
- Nie podłączaj ładowarki do prądu dopóki nie jest zupełnie sucha.

**W przypadku jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego, szczególnie w obecności dzieci, powinny być zawsze przestrzegane podstawowe środki ostrożności.**

**Szczoteczka jest zgodna z odpowiednimi paragrafami wymogów obowiązujących na terenie USA, m.in. Code of Federal Requirements 21, rozdział 1, podrozdział J, zdrowie radiologiczne. Szczoteczka zawiera ładowalne baterie (akumulator) w trosce o ochronę środowiska.**

# 10 KROKÓW DO BIELSZEGO UŚMIECHU

---

1

Nałóż odpowiednią ilość swojej ulubionej pasty na końcówkę szczoteczki.

2

Ustaw szczoteczkę pod kątem 45 stopni do linii dziąseł.

3

Przygotuj się na niezapomniane przeżycie!

4

Włącz urządzenie.

5

Zacznij od szczotkowania prawej lub lewej części górnego łuku zębowego.

6

Pamiętaj, by dokładnie szczotkować wszystkie powierzchnie zębów. Przesuwaj szczoteczkę wzdłuż zębów i okolicy dziąseł. Delikatnymi ruchami czyść powierzchnie żujące.

7

Nie szoruj – pozwól szczoteczce wykonać całe zadanie.

8

Po 30 sekundach automatyczny timer zatrzyma na chwilę ruch szczoteczki, w tym czasie przenieś końcówkę na kolejną partię uzębienia.

9


Szczotkuj po kolei wszystkie obszary, najpierw górnego, następnie dolnego łuku zębowego.

10

Myj zęby dwa, trzy razy dziennie przez dwie minuty.

# MAGNETYCZNE ETUI PODRÓŻNE

*Eleganckie etui z zamknięciem magnetycznym posiada również funkcję ładowarki. Pozwala na ładowanie szczoteczki poprzez kabel USB według upodobania z laptopa, komputera.*

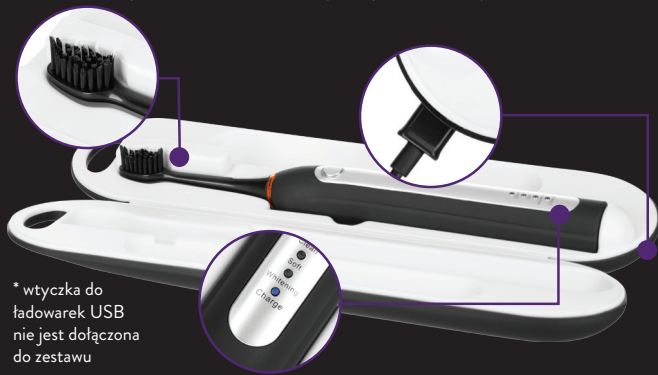

\* wtyczka do ładowarek USB nie jest dołączona do zestawu

## Działanie:

1. Otwórz górną część etui i umieść rękojeść w środku.
2. Podłącz etui do interfejsu USB lub do wtyczki do ładowarek USB\*.
3. Ładuj przez jedną dobę. Dioda wskaźnika ładowania powinna świecić przez cały czas.

**Etui korzysta ze standardowego portu USB. Jest kompatybilne z rękojeścią Profesjonalnej Szczoteczki Sonicznej.**

## Ostrzeżenia!

- Nie przechowuj etui tam, gdzie jest narażone na upadek lub kontakt bezpośredni z wodą.
- Nie wrzucaj i nie zanurzaj etui w wodzie. W razie zamoczenia odłącz od zasilania.
- Nie stosuj podczas kąpieli.
- Nie sięgaj po etui, które wpadło do wody lub innego płynu. Odłącz przed oczyszczeniem i upewnij się, że etui jest suche zanim podłączysz je do prądu.

## WŁAŚCIWOŚCI

Wymiary 298.8 mm(dł.) x 75 mm(szer.) x 40 mm(wys.)

Waga 235 g (+/- 0,5 g)

# PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM!

## ZACHOWAJ TĄ INSTRUKCJĘ

Tylko do użytku domowego:

- Szczoteczka jest wyposażona w wodoszczelną rękojeść. Jest bezpieczna i zaprojektowana do użytkowania w łazience. Szczoteczka posiada stopień ochrony IPX7. Oznacza to, że jest odporna na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut.
- Pamiętaj: szczoteczka nie jest przystosowana do pracy pod wodą!
- Produkt nie jest przeznaczony do samodzielnej naprawy.
- Przechowuj ładowarkę w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Rozprostuj kabel przed użyciem.
- W razie awarii nie rozkręcaj urządzenia i nie wymieniaj żadnych podzespołów, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem. Skontaktuj się z S·E·Y·S·S·O.
- Zniszczony przewód zasilający musi zostać wymieniony na nowy. Skontaktuj się z S·E·Y·S·S·O.
- W razie upuszczenia, wymień końcówkę przed następnym użyciem. Nawet jeżeli zniszczenie nie jest widoczne.

