

## Urządzenie do mezoterapii bezigłowej

### Beauty Fresh Skin Pro



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup urządzenia Beauty Fresh Skin Pro

### O produkcie

**Garett Beauty Fresh Skin Pro** to nowoczesne urządzenie do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych skóry twarzy w zaciszu domowym. Posiada **5 trybów pracy**, dzięki którym znajdzie zastosowanie dla każdego typu cery i problemu skórnoego.

W urządzeniu zostały zastosowane funkcje mezoterapii bezigłowej **RF, prądy EMS, terapia światłem LED, wibracje soniczne** oraz **krioterapia**.

Regularne używanie **Garett Beauty Fresh Skin Pro** optymalizuje codzienną pielęgnację, pozwala zachować młodość i jędrność skóry oraz wspomaga wchłanianie składników aktywnych.

#### KIERUNKI DZIAŁANIA:

- głębokie oczyszczanie skóry
- redukcja zmarszczek
- likwidacja przebarwień
- remodeling twarzy
- rozjaśnianie plam i wyrównanie kolorytu skóry
- wygładzanie i poprawa tekstury skóry
- konturowanie owalu twarzy
- redukcja cieni
- eliminacja tzw. „worków” pod oczami i ciemnych obwódok oczu
- leczenie trądziku
- witaminizowanie

#### WSKAZANIA:

- skóra sucha, odwodniona
- zmarszczki, utrata jędrności
- podwójny podbródek
- szary, ziemisty kolor
- przebarwienia
- cera tłusta/mieszana, zanieczyszczona

#### PRZECIWWSKAZANIA:

- ciąża i karmienie piersią
- metalowe implanty, rozrusznik serca
- stany chorobowe organizmu, gorączka
- choroby tarczycy
- epilepsja
- przerwana ciągłość naskórka
- wstrzyknięcia typu botox, wypełnienia
- choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze skóry twarzy
- nowotwór
- aktywna opryszczka
- bezpośrednio po korzystaniu z sauny, solarium lub ekspozycji na słońce

### Funkcje produktu

**1. RADIOFREKWENCJA RF** – rodzaj terapii wykorzystującej promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości fal radiowych. Rozgrzewając skórę stymuluje regenerację kolagenu, co daje efekt ujędrnienia i rozjaśnienia cery. Redukuje zmarszczki i blizny oraz przywraca jej elastyczność i blask.

**2. ELEKTROSTYMULACJA EMS** – metoda wykorzystująca prąd impulsowy o niskiej częstotliwości. Polega na stymulacji mięśni, uelastycznia, napina skórę, niwelując jej obwisłość, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej.

**3. WIBRACJE SONICZNE** – przyczyniają się do skutecznego oczyszczenia skóry. Wpływają również na poprawę krążenia oraz dotlenienia skóry, co sprawia, że substancje aktywne zawarte w kosmetykach szybciej się wchłaniają.

#### 4. TERAPIA LED

• **światło czerwone:** (fala o długości 620 nm)  
Dociera do głębokich warstw skóry, aktywując włókna kolagenowe, usprawnia cyrkulację krwi, redukuje zmarszczki i wygładza skórę. Odpowiednia dla każdego rodzaju cery, w szczególności z oznakami starzenia się.

• **światło niebieskie:** (fala o długości 465 nm)  
Zabija bakterie, działa kojąco, redukuje trądzik i blizny potrądzikowe, obkurcza pory. Ma działanie przeciwzapalne. Wskazane dla cery tłustej, trądzikowej oraz ze skłonnością do teleangiektazji.


**5. JONOWE OCZYSZCZANIE** – tryb ten pozwala na oczyszczenie i wyciszenie skóry, redukcję zmian trądzikowych, likwidację przebarwień, zwężenie porów oraz regulację gruczołów łojowych. Podczas pracy wytwarzane jest środowisko zasadowe, które zapobiega rozwojowi bakterii, odpowiedzialnych za zmiany trądzikowe. Zwiększona zostaje także absorpcja składników odżywczych, których ładunek jest dodatni. Rozgrzanie skóry i mikrowibracje dodatkowo wspomagają proces oczyszczania cery.

**6. JONOWE NAWILŻANIE** – na głowicy wytwarzane są jony ujemne. Podczas pracy generowane jest środowisko kwaśne, które stwarza idealne warunki do prawidłowego funkcjonowania komórek odpowiedzialnych za produkcję kolagenu i elastyny. Skóra staje się jędrniejsza, elastyczna, drobne zmarszczki ulegają spłyceniu, a owal twarzy znacznie się poprawia. Zwiększona zostaje absorpcja składników odżywczych, których ładunek jest ujemny.

**7. KRIOTERAPIA** – zimny kompres łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, koi oraz przyspiesza regenerację skóry po zabiegach termicznych. Zastosowanie zimna wspomaga odnowę biologiczną komórek, a skóra staje się gładka i jędrna, poprawia się owal twarzy. Zabiegi z wykorzystaniem zimna doskonale radzą sobie z obrzękami powstałymi podczas snu, tzw. „workami” i podpukniętymi powiekami.

💡 **Stosowanie terapii naprzemiennej ciepło/zimno skutecznie ujędrnia skórę.**

### Opis produktu

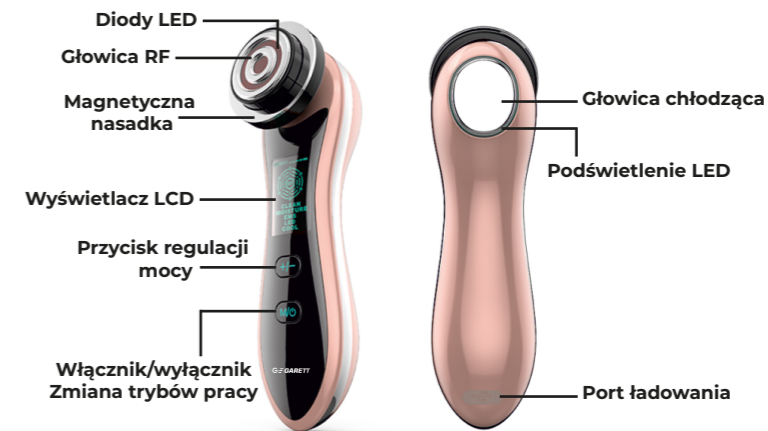

### Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: Garrett Beauty Fresh Skin Pro	
Częst. wibracji: 10 - 30 Hz	Temperatura: 6 - 38°C (+/-5)
Pojemność baterii: 1200 mAh	Czas ładowania: ok. 150 min
Waga produktu (netto): 298 g	Wymiary: 187 x 51 x 63 mm

**Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie [www.garett.pl](http://www.garett.pl). Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.**

### Instrukcja użytkowania

Przed i po każdym użyciu urządzenia, należy dokładnie oczyścić i zdezynfekować głowicę. W tym celu przetrzyj ją chusteczką nasączoną płynem do dezynfekcji i wytrzyj do sucha. Nie wolno spryskiwać głowicy bezpośrednio płynem bądź zanurzać w wodzie.

- Usuń biżuterię oraz soczewki kontaktowe. Wykonaj demakijaż twarzy – rekomendujemy użycie szczoteczki sonicznej **Garett Beauty Clean** lub **Garett Beauty Clean Soft**.
- Aby włączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk zasilania **M/O** – usłyszysz sygnał dźwiękowy. Urządzenie automatycznie uruchamia się w trybie **RF**.
- Za pomocą jednokrotnego naciśnięcia przycisku zasilania zmienisz tryb pracy na odpowiadający Twoim indywidualnym potrzebom.
- Możesz zwiększyć/zmniejszyć moc urządzenia. W tym celu należy odpowiednią ilość razy nacisnąć przycisk zwiększający moc. Urządzenie domyślnie pracuje na najniższym poziomie.
- Aby oczyścić skórę w trybie **CLEAN**, nałóż płatek kosmetyczny zwilżony wodą/płynem micelarnym na głowicę urządzenia.
- Wykonuj ruchy koliste/posuwiste zawsze w kierunku od dołu ku górze bądź od środka twarzy na zewnątrz.
- Nie trzymaj urządzenia w jednym miejscu, ponieważ może to skutkować poparzeniem skóry (z wyjątkiem trybu **COOL**).

Do pozostałych trybów zaaplikuj na skórę twarzy serum/ampułkę/koncentrat dostosowany do potrzeb twojej skóry. Mogą to być preparaty o konsystencji wodno-żelowej bądź maseczki w płacie, nasączone substancjami odżywczymi. W przypadku szybkiego wchłonięcia się serum, w celu zwiększenia komfortu pracy głowicy na skórze, zaleca się stosowanie żelu przewodzącego prąd do USG.

- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy.
- Urządzenie wyłącza się po 5 minutach bez interakcji użytkownika.
- Po zakończonym zabiegu oczyść głowicę urządzenia.
- Oczyść skórę – usuń bądź wmasuj nadmiar preparatów aktywnych.
- Możesz zaaplikować maskę dostosowaną do potrzeb skóry.

## Instalacja płatka kosmetycznego


1. Zdejmij magnetyczną nasadkę urządzenia.


2. Zwilż płatek kosmetyczny wodą/płynem micelarnym bądź innym preparatem myjącym. Odsącz, aby zbyt duża ilość płynu nie dostała się do urządzenia (nie jest wodoodporne) i nie ciekła po twarzy. Zaleca się stosowanie cienkich płatków kosmetycznych w celu intensywniejszego działania urządzenia.


3. Dociśnij wcześniej zdjęte koło magnetyczne w celu stabilizacji płatka kosmetycznego.

4. Włącz urządzenie w trybie **CLEAN**. W zależności od potrzeb, możesz zwiększyć intensywność pracy. Urządzenie nagrzewa się stopniowo. Wykonuj ruchy koliste i posuwiste, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji użytkownika. Omijaj okolice tarczycy.

5. Po skończonym zabiegu ponownie zdejmij nasadkę magnetyczną i wyrzuć użyty płatek. Stonizuj i osusz skórę. Jest gotowa do kolejnych zabiegów.

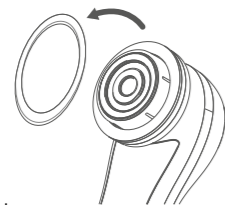

 Wykonuj zabieg przesuwając urządzeniem zgodnie ze strzałkami na rysunku.

 Nie należy używać urządzenia w tych partiach ciała. Tylko w trybie COOL dozwolony jest zabieg w okolicach oczu (dotykając powiek). Przed rozpoczęciem należy zamknąć oczy.

 W trybie LED dozwolony jest zabieg w okolicach oczu, pod warunkiem zamknięcia ich i trzymania urządzenia w odległości nie mniejszej niż 5 cm od skóry.



## Tryby pracy urządzenia

### 1. RF

**Funkcje:** RF

**Charakterystyka:** Rozgrzanie głębokich warstw naskórka, zwiększenie proliferacji włókien kolagenowych.

**Kosmetyki:** ampułki/serum/płyn micelarny

**Częstotliwość:** co 10 - 14 dni

### 2. CLEAN

**Funkcje:** RF + jonizacja dodatnia + wibracje soniczne

**Charakterystyka:** Rozgrzanie, rozjaśnienie i oczyszczenie skóry, przy pomocy nawilżonego płatka, umieszczonego na głowicy.

**Kosmetyki:** płyn micelarny/żel do mycia twarzy/ampułka dla skóry tłustej

**Częstotliwość:** co 2 - 3 dni

### 3. MOISTURE

**Funkcje:** RF +EMS + jonizacja ujemna + wibracje soniczne

**Charakterystyka:** Rozgrzanie głębokich partii skóry, penetracja składników aktywnych, rozjaśnienie, nawilżenie i odżywienie skóry.

**Kosmetyki:** ampułki/serum/koncentrat o konsystencji wodno-żelowej

**Częstotliwość:** co 10 - 14 dni

### 4. EMS

**Funkcje:** EMS + RF

**Charakterystyka:** Rozgrzanie włókien kolagenowych, stymulacja mięśni twarzy.

**Kosmetyki:** płyn micelarny/ampułka/serum

**Częstotliwość:** co 10 - 14 dni

### 5. RF LED

**Funkcje:** RF + czerwone światło LED

**Charakterystyka:** Rozgrzanie głębokich partii skóry, zwiększenie proliferacji włókien kolagenowych.

**Kosmetyki:** ampułki/serum

**Częstotliwość:** co 10 - 14 dni

### 6. COOL

**Funkcje:** krioterapia (zimny kompres) + niebieskie światło LED

**Kosmetyki:** ampułki łagodzące, p/obrzękowe, witaminowe

**Częstotliwość:** codziennie/w zależności od potrzeb

## Uwagi dla użytkowników

1. Przed użyciem tego produktu prosimy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.
2. Produkt jest ładowany za pomocą dołączonego zestawu ładującego.
3. Nie należy używać urządzenia oraz próbować go odłączać od gniazda mokrymi rękami.
4. Nie należy niszczyć, modyfikować przewodu zasilającego oraz produktu, ponieważ może to skutkować jego uszkodzeniem.
5. Należy unikać zabrudzeń portu ładowania i przewodu zasilającego.
6. Należy zaprzestać ładowania w przypadku uszkodzenia wtyczki, przewodu zasilającego lub nagrzewania się nawet jednego z elementów.
7. Używanie akcesoriów, które nie są dostarczane z tym produktem, może być niebezpieczne.
8. Nie przechowywać produktu w wilgotnych miejscach, wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
9. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z serwisem firmy Garrett.
10. Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, uczulonej lub w stanie zapalnym. **Patrz – przeciwwskazania.**
11. Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci.

### Przykładowa kolejność kompletnego zabiegu:


1. Początkowo tryb **CLEAN** (skóra oczyszczona z zanieczyszczeń, rozgrzana i przygotowana do wchłaniania substancji aktywnych).
2. Następnie **MOISTURE** (głębokie wprowadzanie składników aktywnych).
3. **RF** (dla dodatkowego napięcia skóry, działania przeciwzmarszczkowego).
4. **COOL** (dla wyciszenia skóry na zakończenie i zamknięcia porów).

 Jeśli po zabiegach skóra jest zaczerwieniona, napięta i obrzęknięta – zastosuj tryb COOL.

 Bardzo dobre efekty ujędrnienia skóry przynosi naprzemienne stosowanie trybów RF i COOL.

Urządzenie **Garrett Beauty Fresh Skin Pro** można stosować o każdej porze roku. Najlepiej wieczorem, aby skóra miała czas na regenerację podczas snu. W trakcie jednej sesji możesz korzystać z różnych trybów pracy urządzenia. Dzięki terapii łączonej, efekty są jeszcze skuteczniejsze. Dobór trybów pracy urządzenia zależy od oczekiwanych efektów.

**Zaleca się serię 5 - 8 zabiegów, co 10 - 14 dni.**

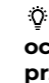 Pamiętaj, że tylko regularne stosowanie urządzenia przyniesie oczekiwane efekty, a cykliczność zabiegów pozwoli je utrzymać przez długi czas.

 Nie należy wykonywać zabiegów bezpośrednio po korzystaniu z solarium, sauny, czy po opalaniu oraz bezpośrednio przed wyjściem na mroz.

 Po zabiegu i w trakcie wykonywania serii należy zabezpieczać twarz kremem z filtrem SPF.

## Naprawa i konserwacja

1. W przypadku uszkodzenia lub awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
2. Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić produkt. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.
3. Urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne i nie należy myć go wodą.
4. Nie użytkując urządzenia przez dłuższy czas, zaleca się regularne ładowanie i przechowywanie urządzenia w suchym i chłodnym miejscu, aby przedłużyć jego żywotność.

## Gwarancja i reklamacja


Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać ją wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

**www.garett.pl**

### Producent:

GARETT sp. z o.o.  
ul. Targowa 18/1413  
25-520 Kielce  
**www.garett.pl**

 Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w P.R.C.